

IPLTM Quantum SR




IPL PHOTOREJUVENATION MIT DEM IPL QUANTUM SR

- Keine behandlungsbedingten Ausfallzeiten, nichtablativer Eingriff
- Behandlung des ganzen Gesichts, von Dekolletee, Hals und Händen für ein aufgefrischtes, allgemein jugendlicheres Aussehen
- Zügige Behandlung und hoher Patientendurchsatz dank einer Wiederholungsrate von zwei Sekunden und einer großen Spotgröße
- Schnelle, einfache Bedienung über voreingestellte Parameter und Touchscreen-Steuerung oder individuell angepasste Einstellung der Behandlungsparameter durch den Nutzer
- Zeitgemäßes, kompaktes Design. Ergonomischer Behandlungskopf mit integrierter Kontaktkühlung.

MIT DEM LUMENIS IPL QUANTUM SR KANN AUCH IHRE PRAXIS EINE DER ZURZEIT MEISTGEFRAGTEN AESTHETISCHEN BEHANDLUNGEN BIETEN

IPL Quantum SR frischt das Aussehen einer durch Lichteinwirkung gealterten Haut auf und entfernt Altersflecken (durch Sonneneinwirkung entstandene Hautflecken), fast alle gutartigen braunen Pigmentflecken und erweiterte Äderchen.

Innovative neue Anwendungsbereiche für die intensiv gepulste Lichttechnologie (IPLTM) sind in der Behandlung von vaskulären Rötungen und Sonnenschäden in einem einzigen Programm zu finden.

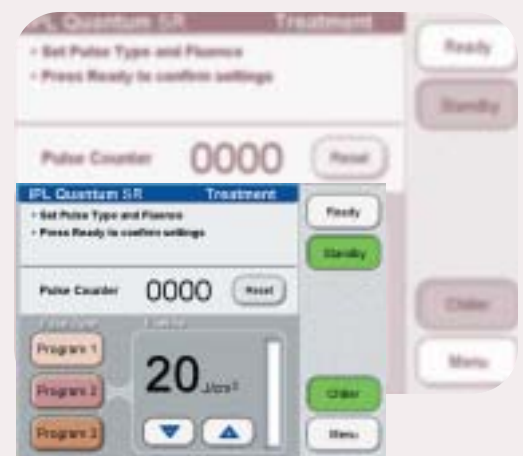

Touchscreen fördert intuitiven Betrieb

IPL™ Quantum SR

Technische Daten

Lichtquelle:	Intense Pulsed Light (intensiv gepulstes Licht)
Standardspektren (Wellenlänge):	560 - 1200 nm
Optionale Spektren (Wellenlänge):	590 - 1200 nm 640 - 1200 nm
Energiedichte:	15 - 45 J/cm ²
Pulssequenz:	2 - 3 pulse
Pulsdauer:	6 - 26 ms
Verzögerungsintervall zwischen den Pulsen:	5 - 60 ms
Laserstrahlabgabe:	Direktkopplung durch beschichtetes Lichtführungsfilter
Spotgröße:	8 x 34 mm
Wiederholungsrate:	0.5 Hz
Integrierte Hautkühlung:	Circa 0o C

Technische Daten – System

Elektrische Anforderungen:	200/-240 - ± 10%, 25/16A, 50/60 Hz
Abmessungen:	(40 x 40 x 100 cm) 16" x 16" x 39"
Gewicht:	(75 kg) 165 lbs

DIE TECHNOLOGIE IST EINFACH IM EINSATZ UND DIENT ZUR BEHANDLUNG ERWEITERTER ÄDERCHEN UND SONNENSCHÄDEN FÜR EIN FRISCHERES, JUGENDLICHERES AUSSEHEN

Diese hervorragende Methode zur Behandlung von vaskulären und pigmentierten Läsionen verwendet Breitspektrum IPL™, eine Nichtlaser-Lichttechnologie. Bemerkenswerte ästhetische Ergebnisse werden typischerweise innerhalb eines Zeitraums von vier Monaten und einer Serie von fünf, das ganze Gesicht umfassenden Behandlungen erzielt.

DER SR-BEHANDLUNGSKOPF



Das zeitgemäße, kompakte Design des Systems umfasst einen ergonomischen Behandlungskopf mit integrierter Kontaktkühlung.

Lumenis Inc.
 2400 Condensa Street
 Santa Clara, CA 95051 USA
 Tel 408 764 3000
 800 635 1313
 Fax 408 764 3999
 800 505 1133

Lumenis (HOLLAND) BV
 Amstelveen, Niederlande
 Tel + 31 20 347 50 60
 Fax + 31 20 347 50 99

Lumenis (GERMANY) GmbH
 Dieburg, Deutschland
 Tel + 49 6071 922 0
 Fax + 49 6071 922 400

Lumenis (FRANCE) SARL
 Suresnes, Frankreich
 Tel + 33 1 41 44 99 99
 Fax + 33 1 47 28 99 09

Lumenis (ITALY) Srl.
 Rome, Italien
 Tel + 39 06 90 75 230
 Fax + 39 06 90 75 269

Lumenis (UK) Ltd.
 London, Großbritannien
 Tel + 44 20 8324 4200
 Fax + 44 20 8324 4222

Lumenis Ltd.
 Yokneam, Israel
 Tel + 972 4 959 9000
 Fax + 972 4 959 9050

Lumenis (JAPAN) Co. Ltd.
 Tokyo, Japan
 Tel + 81 3 5789 8300
 Fax + 81 3 5789 8310

Lumenis (HK) Ltd.
 Kowloon, Hong Kong
 Tel + 852 2174 2800
 Fax + 852 2722 5151

Lumenis (HOLLAND) BV
 Beijing Office
 Beijing, China
 Tel + 86 10 6510 2620
 Fax + 86 10 6510 2621

Lumenis (SWEDEN) AB
 Kristianstad, Schweden
 Tel + 46 44 21 21 26
 Fax + 46 44 21 21 79

internet: www.Lumenis.com

email: information@lumenis.com



Achtung: Nur zur ärztlichen Anwendung bestimmt.

Lumenis, das Lumenis-Logo und Quantum sind Marken oder eingetragene Marken der Lumenis-Unternehmensgruppe. Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Copyright © 2002, Lumenis-Unternehmensgruppe. Alle Rechte vorbehalten.